

Indications

- Casted fracture
- Bulky bandages

Contraindications

- Open fractures

Cleaning Instructions/Maintenance

- When the shoe is slightly dirty, clean it using a damp cloth or a soft brush.
- Allow the shoe to air dry only.

Instructions for use

1. Unhook the bungee-closure system.
2. Press and hold the fastener of the locking mechanism and slide toward the toes in order to widen the ankle strap.
3. Place foot in cast shoe.
4. While holding the end of the bungee-closure system, press and hold the fastener of the locking mechanism and slide toward the ankle.
5. Hook the bungee-closure system.

Caution

Please always follow these instructions for use. In case of pain or swelling, discontinue use and consult your medical provider immediately. This device is designed to assist recovery and should be used exclusively under the instruction of and in consultation with a healthcare professional. DARCO International Inc. does not assume any responsibility for misuse of the product. Do not drive a vehicle while you are wearing this device. Use extreme caution when walking on all surfaces when using this device. Walk more slowly than normal. This device is for single-patient use only.

To the patient/user: This device has been designed and manufactured by DARCO International, Inc. to be state of the art for treatment of a specific medical condition. Should any serious incident occur in relation to this device it should be reported to the manufacturer at the contact information listed on this document and the proper authority of the country or state where you are located. When treatment is complete, dispose of this device according to local laws and ordinances.



Manufactured for:
DARCO International, Inc.
810 Memorial Blvd.
Huntington, WV 25701, USA
Phone 304.522.4883

www.darcointernational.com



UK Responsible Person:
V-M Orthotics Ltd.
Unit 25 Halesworth Business
Centre Norwich Road
Halesworth Suffolk IP19 8QJ
United Kingdom




DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting, Germany
Telefon +49 8807 9228 0
www.darco.de

BACS-IFU-21_Rev0625

DARCO

Body Armor Cast Shoe

Instructions For Use

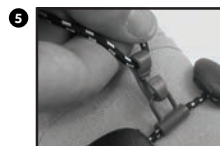

Indicaciones

- Fractura enyesada
- Vendajes abultados

Contraindicaciones

- Fracturas abiertas

Instrucciones de limpieza/mantenimiento

- Cuando el zapato esté un poco sucio, límpielo utilizando un paño húmedo o un cepillo blando.
- Seque el zapato únicamente al aire libre.

Instrucciones de uso

1. Desenganche el sistema de cierre elástico.
2. Presione y mantenga presionado el cierre del mecanismo de bloqueo y deslice hacia los dedos del pie para ensanchar la correa del tobillo.
3. Coloque el pie en la férula.
4. Mientras sostiene el extremo del sistema de cierre elástico, presione y mantenga presionado el sujetador del mecanismo de bloqueo y deslícese hacia el tobillo.
5. Enganche el sistema de cierre elástico.

Precaución

Siga siempre estas instrucciones de uso. En caso de dolor o hinchazón, deje de usarlo y consulte a su proveedor médico de inmediato. Este dispositivo está diseñado para ayudar en la recuperación y debe usarse exclusivamente bajo las instrucciones de un profesional de la salud, luego de una consulta. DARCO International Inc. no asume ninguna responsabilidad por el mal uso del producto. No conduzca mientras esté utilizando este dispositivo. Tenga mucho cuidado al caminar sobre todas las superficies cuando utilice este dispositivo. Camine más despacio de lo normal. Este dispositivo es para uso exclusivo de un solo paciente.

Para el paciente/usuario: este dispositivo ha sido diseñado y fabricado por DARCO International, Inc. con el fin de otorgar la calidad más avanzada en el tratamiento de una afección médica específica. Si ocurriera algún incidente grave en relación con este dispositivo, se debe informar al fabricante en la información de contacto que figura en este documento y a la autoridad correspondiente del país o estado donde se encuentra. Una vez finalizado el tratamiento, deseche este dispositivo de acuerdo con las leyes y ordenanzas locales.

Indications

- Fracture plâtrée
- Bandages volumineux

Contre-indications

- Fractures ouvertes

Instructions de nettoyage et entretien

- Si la chaussure est légèrement sale, nettoyez-la avec un chiffon humide ou une brosse douce.
- Laissez la chaussure sécher à l'air uniquement.

Mode d'emploi

1. Détachez le système de fermeture à élastique.
2. Appuyez et maintenez la fermeture du mécanisme de verrouillage et faites-la glisser vers lesorteils afin d'élargir la sangle de la cheville. élargir la sangle de cheville.
3. Placez le pied dans la chaussure plâtrée.
4. Tout en tenant l'extrémité du système de fermeture du sandow, appuyez et maintenez la fixation du mécanisme de verrouillage et faites-la glisser vers la cheville.
5. Attachez le système de fermeture à élastique.

Mise en garde

Veillez toujours suivre les présentes instructions d'utilisation. En cas de douleur ou d'enflure, cessez l'utilisation et consultez immédiatement votre médecin. Cet appareil est conçu pour aider à la récupération et doit être utilisé exclusivement sous les instructions d'un professionnel de la santé et en consultation avec celui-ci. DARCO International Inc. n'assume aucune responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit. Ne conduisez pas de véhicule pendant que vous portez cet appareil. Soyez extrêmement prudent lorsque vous marchez sur toutes les surfaces lorsque vous utilisez cet appareil. Marchez plus lentement que d'habitude. Cet appareil est destiné à un usage par un seul patient.

Pour le patient ou l'utilisateur : Cet appareil à la fine pointe de la technologie a été conçu et fabriqué par DARCO International, Inc. pour le traitement d'une condition médicale spécifique. Si un incident grave survient relativement à cet appareil, il doit être signalé au fabricant aux coordonnées indiquées dans ce document et aux autorités compétentes du pays ou de l'État où vous vous trouvez. Une fois le traitement terminé, jetez cet appareil conformément aux lois et aux ordonnances locales.